
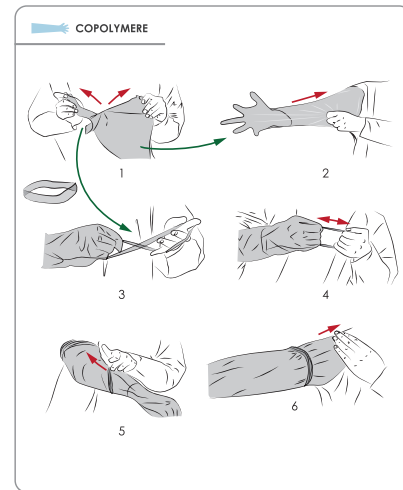
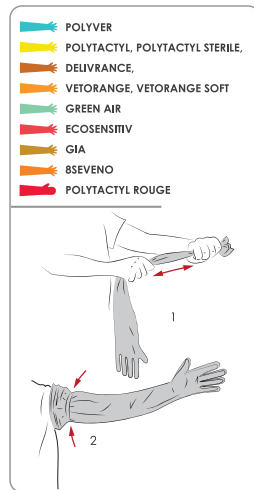


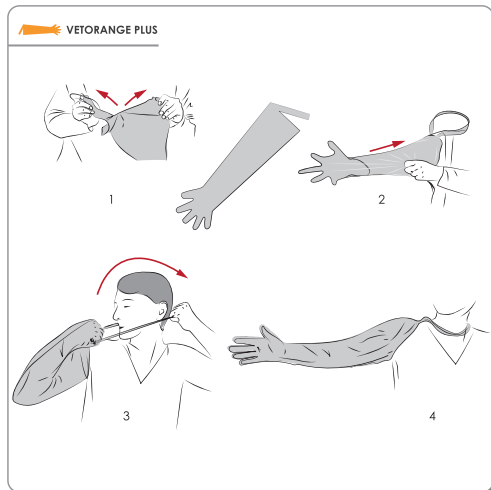

EN / For your safety:
Make sure your hand is clean and dry before putting on the glove.
Avoid jewels and long nails.
Check that the glove is in good condition before putting it on.
In case of contact with biological material, wash your hands with soap.


FR / Pour votre sécurité :
Enfiler le gants sur une main propre et sèche.
Eviter les bijoux et les ongles longs.
Vérifier le bon état du gant avant de l'enfiler.
En cas de contact avec de la matière biologique, se laver les mains avec le l'eau savonneuse.

DE / Stellen Sie sicher, dass
Ihre Hand sauber und trocken ist, bevor Sie den Handschuh anziehen.
Vermeiden Sie Schmuck und lange Nägel.
Überprüfen Sie, dass der Handschuh in einem guten Zustand ist, bevor Sie ihn anziehen.
Bei Kontakt mit biologischem Material waschen Sie Ihre Hände mit Seife.

NL / Voor uw veiligheid:
Doe handschoenen aan op schone en droge handen.
Vermijd sieraden en lange nagels.
Controleer of de handschoen niet beschadigd is voordat je deze aandoet.
In geval van contact van blote handen met biologisch materiaal dan deze goed met zeep wassen.

ES / Para su seguridad:
Coloque los guantes sobre manos limpias y secas.
Evite joyas y uñas largas.
Verifique el estado del guante antes de colocarlo.
En caso de contacto con material biológico, lávese las manos con agua y jabón.

I / Assicuratevi che le vostre
mani siano asciutte e pulite prima di infilarsi i guanti.
Evitare gioielli e unghie lunghe.
Controllare che il guanto sia in ottime condizioni prima di utilizzarlo.
In caso di contatto con materiale biologico, lavare le mani col sapone.

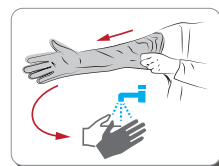

Choisissez la forme, l'épaisseur et la taille qui vous correspond. Nous nous adaptons à tous vos besoins !
Choose the shape, density and size that suit you best. Our gloves fit all your needs!

Insemination gloves - Gants d'insémination - Besamungshandschuhe - Inseminatie handschoenen - Guanti per la fecondazione - Guantes de inseminación

24µ 8SEVENO[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

87°
34°

24µ GIA[®] S/M/L/XL
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

100°
39°

28µ POLYTACTYL ROUGE[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

85°
33°

+10°C
+40°C



Latex-free



0334



see label / voir l'étiquette / siehe Etikett / zie label / ver etiqueta / vedi etichetta



Polysem
ZA Jean Moulin
78120 Rambouillet - France
www.polysem.com



Veterinary gloves single use - Gants vétérinaire à usage unique - Tierärztliche Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Guantes desechables para uso veterinario - Guanto veterinario monouso - Veterinaire handschoenen voor eenmalig gebruik

36µ POLYVER[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

35µ POLYTACTYL[®] S/M/L/XL
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

100°
39°

35µ POLYTACTYL STERILE[®] M/L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

100°
39°

3µ DELIVRANCE[®] S/M/L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

285µ VETORANGE[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

27µ ECOSENSITIV[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

24µ VETORANGE SOFT[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

25µ COPOLYMERE[®] S/M/L/XL
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

100°
39°

30µ VETORANGE PLUS[®] M/L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION

92°
36°

100°
39°

24µ GREEN AIR[®] L
★★★★★ RESISTANCE
★★★★★ SENSITIVITY
★★★★★ ODOR PROTECTION
★★★★★ BREATHABILITY

92°
36°

+10°C
+40°C



+10°C
+25°C



Normes : EN ISO 374-5 : 2016
Examen UE de type réalisé par : IFTH (n°0072)
Avenue Guy-de-Collongue - F-69123 Ecully Cedex

EN / EU certificate of type module B realized by IFTH (n°0072), subject to a production audit module D realized by ASQUAL[®] (n°0334).
FR / Attestation UE de type module B réalisée par IFTH (n°0072), soumise à un audit production module D réalisé par ASQUAL[®] (n°0334).
DE / EU-Zertifikat des Typs Modul B, das von IFTH (Nr. 0072) ausgestellt wurde (vorbehaltlich eines Produktionsaudits, Modul D, durchgeführt von ASQUAL[®] Nr. 0334).
NL / EU Certificaat van type module B uitgevoerd door IFTH (n°0072), op basis van een productie-audit module D uitgevoerd door ASQUAL[®] (n°0334).
ES / Certificación UE módulo B realizada por IFTH (n°0072), sometida a una auditoría de producción módulo D realizada por ASQUAL[®] (n°0334).
I / Certificato di tipo UE modulo B prodotto da IFTH (n°0072), soggetto ad audit di produzione modulo D effettuato da ASQUAL[®] (n°0334).

The EU declaration of conformity is available on the website www.polysem.com

EN / These gloves are not controlled against viruses. In case of any doubt, you can add a surgical glove on the Polysem glove. Also, these gloves do not protect from chemical products. These gloves protect against micro-organisms, in accordance with regulation (UE) 2016/425 on personal protective equipment. Penetration resistance has been assessed in laboratory conditions and only concerns the test sample.

The gloves do not contain any substances at levels, which are known or suspected to have adverse effects on the health of the user under foreseeable conditions of use.

The EU declaration of conformity is available on the website www.polysem.com

FR / Ces gants sont non contrôlés contre les virus, en cas de doute, vous pouvez rajouter un gant de chirurgie sur le gant Polysem. Ils ne protègent également pas contre les produits chimiques. Ces gants apportent une protection contre les micro-organismes selon les exigences de la réglementation (UE) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que l'éprouvette objet de l'essai.

Les gants ne contiennent pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions réelles d'utilisation.

La déclaration UE de conformité est disponible sur le site www.polysem.com

DE / Diese Handschuhe sind nicht gegen Viren geschützt. Im Zweifelsfall können Sie zu den Polysem-Handschuhen einen Chirurgie-Handschuh hinzufügen. Sie schützen nicht vor chemischen Produkten. Diese Handschuhe bieten Schutz vor Mikroorganismen gemäß den Anforderungen der Regulierung (UE) 2016/425 relative aux équipements de protection individuelle. Die Durchdringungsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen und betrifft nur die Testprobe.

Die Handschuhe enthalten keine Substanzen (auch Konzentrationen), von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie unter vorhersehbaren Verwendungsbedingungen negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben.

Die EU-Konformitätserklärung ist verfügbar in unserer Homepage www.polysem.com

NL / Deze handschoenen zijn niet gecontroleerd op bescherming tegen virussen en chemische producten. Bij twijfel is het mogelijk een extra beschermende handschoen over de Polysem handschoenen te dragen. Deze handschoenen bieden bescherming tegen micro-organismen volgens de vereisten van Verordening (EU) 2016/425 met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen. De penetratieweerstand is geëvalueerd onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het monster dat wordt getest.

Handschoenen bevatten geen stoffen in hoeveelheden waarvan bekend is of waarvan vermoed wordt dat ze schadelijke effecten hebben op de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker onder te verwachten gebruiksomstandigheden.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.polysem.com

ES / Estos guantes no están contralados contra virus, en caso de duda, puede añadir un guante de cirugía por encima del guante Polysem. Tampoco protegen contra los productos químicos. Estos guantes protegen del microorganismo, en conformidad con el reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual. La resistencia a la penetración ha sido evaluada en condiciones de laboratorio y solo se aplica al tubo de ensayo objeto de la prueba.

Bajo condiciones de uso previstas, los guantes no contienen ninguna sustancia en los niveles que se conozca o sospeche, puedan generar efectos adversos para la salud de los usuarios. La Declaración de conformidad de la UE, está disponible en el sitio web www.polysem.com

I / Questi guanti non vengono controllati dalla presenza di virus. In caso di dubbio, potete aggiungere un guanti chirurgico al di sopra del guanto Polysem. Non proteggono dagli agenti chimici. Questi guanti proteggono dai microrganismi, in conformità con il regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione del test.

I guanti non contengono sostanze a livelli, che sono noti o sospettati di avere effetti negativi sulla salute dell'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di utilizzo.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito web www.polysem.com